

Inserts PIEZO. Toujours à la pointe.





Inserts de détartrage PIEZO

- Pour éliminer le tartre dentaire supra et sous-gingival dans tous les quadrants
- Application dans les zones interproximales, du sulcus et à la surface des racines
- Élimination efficace, rapide du tartre et traitement prophylactique

PiezoLED

PIEZO^{soft}

Prophylaxie dentaire



KaVo. Dental Excellence.

PIEZO Scaler 201

Insert de détartrage universel

- Pour éliminer le tartre dentaire supra-gingival dans tous les quadrants
- Travailler du bord des incisives vers la zone du sulcus
- Utilisation tangentielle par rapport à la dent
- N'utiliser que les premiers 2-3 mm de l'insert



PIEZO Scaler 203

Insert Paro fin

- Pour l'élimination des dépôts sous-gingivaux sur les surfaces des racines
- Convient au nettoyage des poches profondes et aux contrôles parodontaux
- Utilisation tangentielle par rapport à la dent
- N'utiliser que les premiers 2-3 mm de l'insert
- Traitement doux (enfants)



PIEZO Scaler 202

- Pour éliminer le tartre dentaire supra et sous-gingival jusqu'à une profondeur de poche de 4 mm dans tous les quadrants
- En particulier dans les zones interproximales et du sulcus
- Utilisation tangentielle par rapport à la dent
- N'utiliser que les premiers 2-3 mm de l'insert



Prophylaxie dentaire



Inserts de parodontologie PIEZO Paro

- Insert diamanté pour le nettoyage des racines et le polissage des surfaces.
- Inserts courbés à gauche ou à droite pour les faces proximales difficilement accessibles
- Parfaite accessibilité dans toutes les poches

PiezoLED

Parodontologie



KaVo. Dental Excellence.

PIEZO Paro 210

Insert diamanté avec un grain de 15 µm

- Pour le polissage des surfaces après le nettoyage et le modelage
- Nettoyage intégral des racines en vision directe (avec lambeau)
- Lissage des surplombs de restauration
- Extension des furcations
- Polissage des surfaces prétraitées avec PIEZO Paro 211



PIEZO Paro 211

Insert diamantée avec un grain de 70 µm


- Pour le nettoyage intégral des racines en vision directe (avec lambeau)
- Lissage des surplombs de restauration
- Extension des furcations



PIEZO Paro 212 et 213

Insert courbé à gauche et à droite pour le débridement parodontal

- Convient particulièrement aux faces proximales difficilement accessibles (linguales, buccales) et aux furcations radiculaires
- Utiliser la face latérale des Inserts

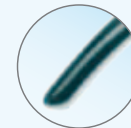

PIEZO Paro 214

- Pour le rinçage et la désinfection des poches parodontales dans tous les quadrants
- Convient spécialement pour les contrôles et les traitements préventifs
- Utilisation tangentielle par rapport à la dent
- N'utiliser que les premiers 2-3 mm de l'insert



Parodontologie



Inserts PiezoLED Cem et Prep

- Mise en place douce et précise d'inlays, d'onlays et de facettes
- Inserts diamantés et partiellement diamantés de forme sphérique pour le biseautage et la finition des bords de cavités
- Insert diamanté pour l'élargissement et le nettoyage de fissures
- Élimination rapide et précise du matériau

PiezoLED

Préparation



KaVo. Dental Excellence.


PIEZO Cem 225

- Pour le collage d'inlays et d'onlays céramiques, de facettes avec des colles composites hautement chargées.
- Idéal pour les grandes préparations
- Travailler en exerçant peu de pression



PIEZO Prep 226


- Insert de préparation diamanté de forme sphérique
- Pour l'ouverture de petits défauts occlusaux et buccaux
- Traitement lent des défauts

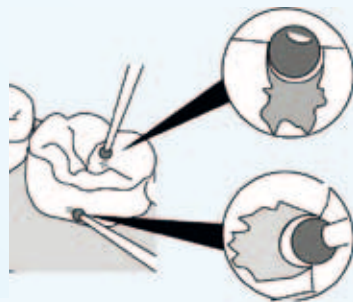

Préparation


PIEZO Prep 227

- Insert de préparation partiellement diamanté de forme sphérique
- Pour le biseautage et la finition des bords de cavité mésiaux proximaux
- Travailler avec une intensité de sortie réduite

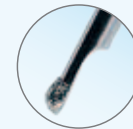


PIEZO Prep 228

- Insert de préparation partiellement diamanté de forme sphérique
- Pour le biseautage et la finition des bords de cavité distaux proximaux
- Travailler avec une intensité de sortie réduite

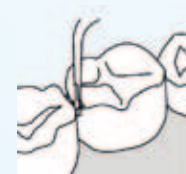

PIEZO Prep 229

- Insert de préparation diamanté
- Pour le nettoyage et l'élargissement de fissures avant le scellement
- Déplacer l'insert lentement dans les fissures en exerçant peu de pression

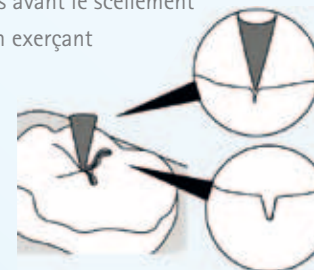



Inserts d'endodontie PIEZO Endo

- Insert conique et cylindrique diamantée
- Porte-lime pour utilisation souple de différentes limes Endo
- Nettoyage, modelage et rinçage efficaces des canaux radiculaires

PiezoLED

Endodontie



KaVo. Dental Excellence.

PIEZO Endo 220

Insert conique diamantée (70 µm) haute efficacité

- Pour trouver facilement les canaux radiculaires et une bonne visibilité
- Élimination des calcifications dans le tiers coronaire du système racinaire
- Travailler sans pression



PIEZO Endo 221

Insert fin cylindrique diamanté (70 µm) haute efficacité


- Pour éliminer les irrégularités et autres obstacles
- Pour former un accès droit à une partie de l'insert cassé dans le canal radicaire
- Travailler sans pression



PIEZO Endo 222

Porte-lime 120° pour une utilisation flexible des différentes limes Piezo Endo

- Convient particulièrement à la zone antérieure et prémolaire
- Utilisation de la technique Step-Back (activation ~ 4s)

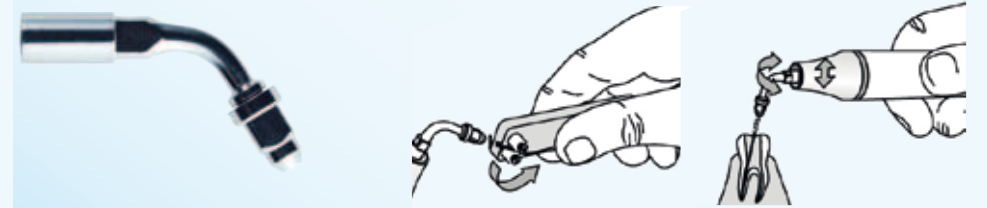

PIEZO Endo 222 avec limes

Set de 5 limes en acier inoxydable pour la préparation, le nettoyage et la désinfection du système de canaux radiculaires (ISO 15, 20, 25, 30, 35)

- Le repère doit rester visible lors de la mise en place des limes
- Les limes peuvent être coudées et adaptées aux canaux radiculaires
- L'irrigation doit couler le long de la lime



Endodontie



Set Implant PIEZO

- Pour le nettoyage efficace d'implants
- L'insert sans métal protège le col de l'implant contre tout endommagement
- Surfaces très propres sans rugosité

PiezoLED


Nettoyage d'implant



KaVo. Dental Excellence.

Set Implant PIEZO

- Pour l'élimination de la plaque et du tartre sur les surfaces d'implants et restaurations en métal ou céramique
- Pour le nettoyage efficace et en douceur des surfaces prothétiques
- Insert sans métal
- 50 applications par embout


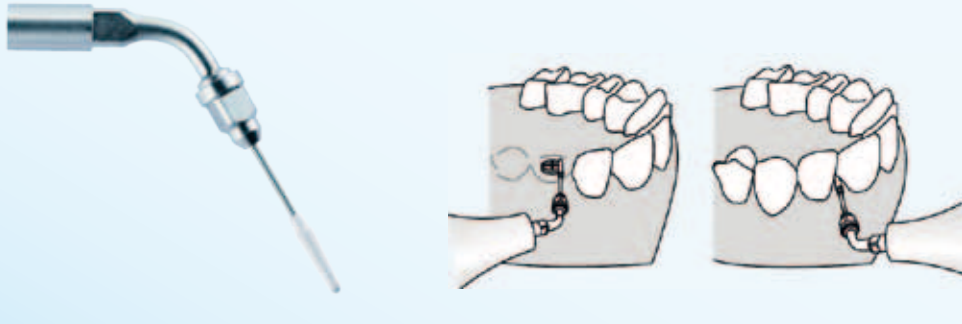


Nettoyage d'implant

Vue d'ensemble des Inserts

Matériau	Désignation	PIEZO ^{soft}	PiezoLED	Contenu
321911	Inserts PIEZO Pack de démarrage		●	12 Inserts n° 201, 202, 203, 212, 213, 214, 220, 221, 222, 225, 227, 228 avec embout Cem Clé PIEZO Endo Limes Endo
	Inserts de détartrage PIEZO Scaler			
1.007.4004	Set de Inserts de détartrage PIEZO Scaler	●	●	3 Inserts de détartrage PIEZO n° 201, 202, 203 avec clé dynamométrique Steribox 6 Inserts Carte de mesure d' usure
1.007.4024	Insert PIEZO Scaler 201	●	●	
1.007.4026	Insert PIEZO Scaler 202	●	●	
1.007.4028	Insert PIEZO Scaler 203	●	●	
	Inserts de parodontologie PIEZO Paro			
1.007.4006	Set de Inserts de parodontologie PIEZO Paro		●	3 Inserts PIEZO Paro n° 212, 213, 214 avec clé dynamométrique Steribox 6 Inserts
1.007.4032	Insert PIEZO Paro 212		●	
1.007.4033	Insert PIEZO Paro 213		●	
1.007.4034	Insert PIEZO Paro 214		●	
1.007.4039	Insert PIEZO Paro 210		●	
1.007.4042	Insert PIEZO Paro 211		●	
	Insert PIEZO Cem			
1.007.4027	Insert PIEZO Cem 225		●	Insert sans embout
1.007.4015	Embout Cem		●	6 embouts CEM
	Inserts de préparation PIEZO Prep			
1.007.4035	Insert PIEZO Prep 226		●	
1.007.4036	Insert PIEZO Prep 227		●	
1.007.4037	Insert PIEZO Prep 228		●	
1.007.4038	Insert PIEZO Prep 229		●	

Matériau	Désignation	PIEZO ^{soft}	PiezoLED	Contenu
	Inserts d'endodontie PIEZO Endo			
1.007.4040	Insert PIEZO Endo 220		●	
1.007.4041	Insert PIEZO Endo 221		●	
1.007.4043	Insert PIEZO Endo 222		●	Porte-lime pour limes PIEZO Endo
1.007.4020	Clé Insert PIEZO Endo		●	Pour le montage du porte-lime PIEZO Endo 222 et des limes PIEZO Endo
1.007.4011	Set de limes PIEZO Endo		●	Set de 5 limes en acier inoxydable à 6 limes ISO 15, 20, 25, 30, 35
	Inserts d'implantologie PIEZO Implant			
1.007.4008	Set Insert Piezo Implant		●	Insert PIEZO Endo 222 Clé PIEZO Endo 4 embouts
1.007.4014	Set Insert Piezo Implant Refill		●	4 embouts

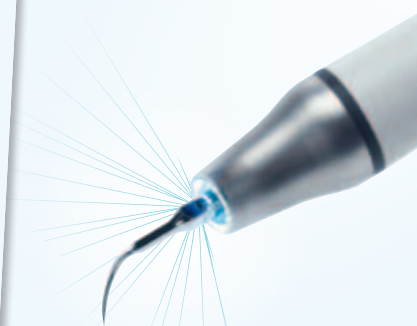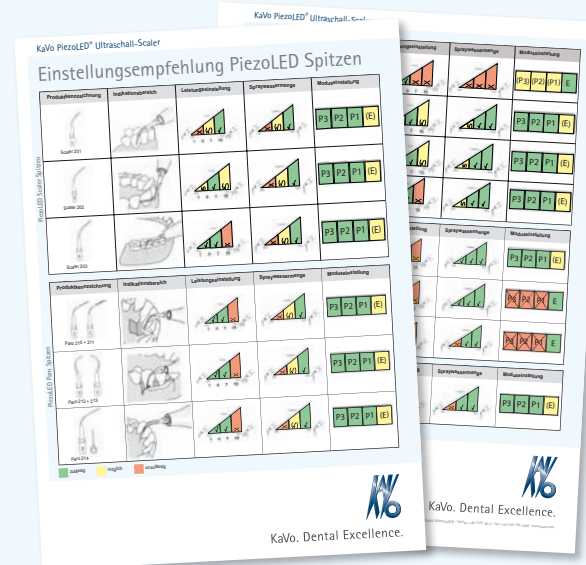

Remarque PiezoLED :
Veuillez tenir compte de nos recommandations de réglage pour les Inserts



KaVo. Dental Excellence.